


PRESSO+

PRESSOTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL PRESSOTHERAPY

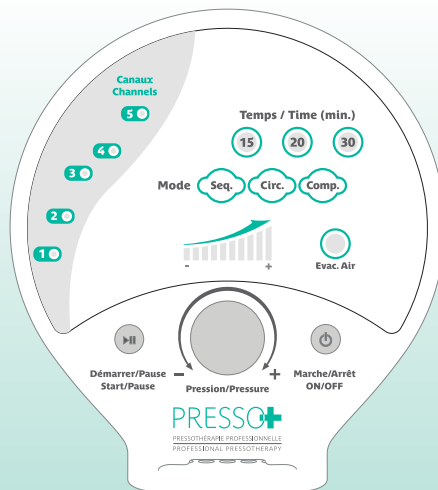

**GUIDE D'UTILISATION - MANUAL DE INSTRUCCIONES
USER MANUAL - HANDLEIDING**

RESUMEN



Gracias por comprar el dispositivo de presoterapia PRESO-PLUS. Para su seguridad y para un rendimiento óptimo del producto, leer atentamente las instrucciones y las instrucciones de seguridad antes del uso.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
2. ANTES DE USAR
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4. PREPARACIÓN Y INSTRUCCIONES
5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas
- Lea esta guía antes de cualquier uso
- Todas las instrucciones de seguridad en este manual deben seguirse a la letra para evitar cualquier problema

1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Gracias por observar las instrucciones de seguridad en este manual para evitar accidentes o peligros mientras el uso de este producto.

El vendedor y el fabricante no serán responsables de ningún accidente en caso de incumplimiento de las instrucciones de seguridad.



= **ADVERTENCIA**

El símbolo de “Advertencia” le avisa de la posibilidad de un accidente fatal, lesiones graves o daños materiales.

1. ANTES DE SU USO



PROHIBIDO

Si se encuentra en una de las siguientes situaciones, consulte con un médico antes de usar PRESSO-PLUS :

- En tratamiento médico, lesión o enfermedad.
- Dolor físico o fiebre alta.
- Tumores malignos.
- Problemas de desarrollo.
- Problemas de equilibrio.
- Problemas de la espina dorsal.
- problemas de la espina dorsal derivados de accidentes o enfermedades previas.
- Inflamaciones en partes de su cuerpo.
- Problemas de cadera.
- Lesiones a las pantorrillas o muslos.
- Lesiones o enfermedades de la piel.
- Enfermedades mentales.
- Enfermedades renales.
- Osteoporosis o venas varicosas.
- Otros tratamientos.



PROHIBIDO

Precauciones a tomar con el dispositivo de presoterapia.

- No utilice otros dispositivos terapéuticos o mantas eléctricas con este producto.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación (riesgo de incendio o descarga eléctrica).
- No intente realizar cambios ni desmontar la unidad.
- Asegúrese de que el producto no caiga desde una altura elevada.
- No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si el enchufe no encaja completamente en el conector eléctrico.
- No sumerja el aparato en agua.
- No guarde el dispositivo en el baño o en zonas húmedas.
- La unidad se utiliza hasta 30 minutos por sesión.
- Tener cuidado no usarlo más de dos ciclos consecutivos.
- No utilice el dispositivo más de 3 veces al día.
- La unidad no puede funcionar correctamente a bajas temperaturas. Almacenar a temperatura ambiente durante al menos 2 horas antes de usar.

2. PRECAUCIONES DE EMPLEO

PROHIBIDO

- Niños o personas que no puedan expresarse no pueden usar este producto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Este producto está destinado a ser utilizado por individuos únicamente.
- No utilice este producto en presencia de líquidos o gases inflamables o explosivos.

PROHIBIDO

- No intente modificar, desmontar o reparar la unidad usted mismo. Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Durante el uso del dispositivo, los músculos de las piernas deben estar relajados.
- No someter el producto a pruebas extremas, descargas, polvo, cambios bruscos de temperatura o humedad.
- Si la unidad entra en contacto con el agua, apáguela y desenchúfela inmediatamente.
- No descomprima ni retire el accesorio de masaje durante el uso. Si desea eliminarlo, apague el dispositivo al principio.
- No corte ni doble las mangueras de aire conectadas a los accesorios con fuerza.
- Si el producto está dañado, deje de usarlo y apáguelo inmediatamente.
- Asegúrese desenchufar la unidad correctamente para no dañar el cable de alimentación.
- No manipule el cable de alimentación ni el conector eléctrico con las manos mojadas. Esto podría provocar un corte de circuito o una descarga eléctrica.
- Sujete la punta del enchufe para conectarla a la toma de corriente.
- El dispositivo debe estar apagado cuando no esté en uso.

3. OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SEGURIDAD

- En caso de cambio de usuario o propietario, este manual debe conservarse junto con el dispositivo
- Este dispositivo no debe ser utilizado por más de una persona en un área pública. Está diseñado para uso doméstico (el fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado)
- En lugares particularmente tranquilos, el ruido de la unidad puede parecer anormalmente alto. Esto no es un signo de disfunción

PROHIBIDO

- Este producto está destinado únicamente para usos descritos en este manual.
- El dispositivo debe utilizarse al máximo: 30 minutos por sesión y 3 veces por día. El uso excesivo o superior, aconsejado puede provocar quemaduras, hematomas y / o dolores.
- El uso de este dispositivo por parte de niños, personas discapacitadas o mujeres embarazadas debe ser supervisado.
- Lea atentamente todas las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad principal.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco después de limpiarlo y asegúrese de que no haya sido dañado por objetos agudos o afilados.

2 COMIENZO

1. DESEMBALAJE

Saque el aparato de la caja con cuidado y verifique lo siguiente :


- Compruebe meticulosamente la unidad principal y verifique si existe alguna anomalía.
- Asegúrese que no faltan piezas ni accesorios.
- Contacte con el distribuidor si detecta cualquier daño o si falta una pieza.

2. ANTE USO


- Debe leer todas las instrucciones y advertencias descritas, debe usar este producto únicamente tal y como se describe en este manual.
- Si usted está sometido a tratamiento médico se le recomienda consultar con su médico antes de usar el aparato.
- El rango ajustable de presión del aire es de 0-250 mmHg (± 30).
- Los accesorios de masaje por aire están sujetas a desgaste y deben renovarse cuando estén dañadas.
- Empezar el masaje con el nivel más bajo y aumentar gradualmente la presión y el tiempo.
- Quítense todas las joyas tales como collares, tobilleras, anillos y relojes antes su uso (evitar la ropa con botones).
- Vestirse de tela fina o una toalla para que la piel no esté en contacto directo con las prendas de masaje por aire.

3 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. UNIDAD PRINCIPAL Y ACCESORIOS

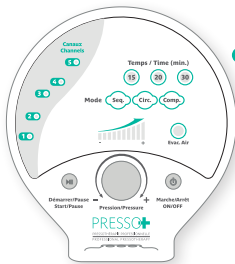

UNIDAD PRINCIPAL

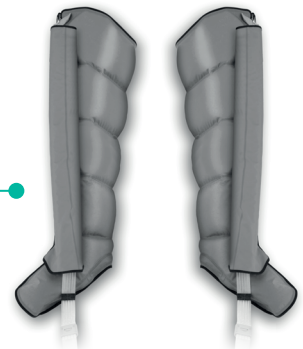

BOTAS DE MASAJE



PLANTILLAS DE SHIATSU



CONECTOR




CONEXIÓN DUAL

ACCESORIOS OPCIONALES :

Los accesorios a continuación son opcionales y pueden comprarse por separado o sustituir si están dañados.




ACCESORIO BRAZO

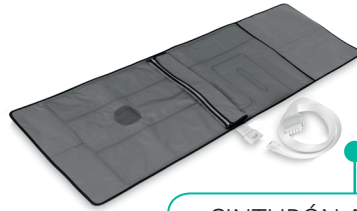

CINTURÓN ABDOMINAL

2. PANEL DE CONTROL

Los botones del panel de control funcionan con un sensor de conductividad (controles táctiles), así que asegúrese de tocarlos suavemente, con la punta de los dedos.

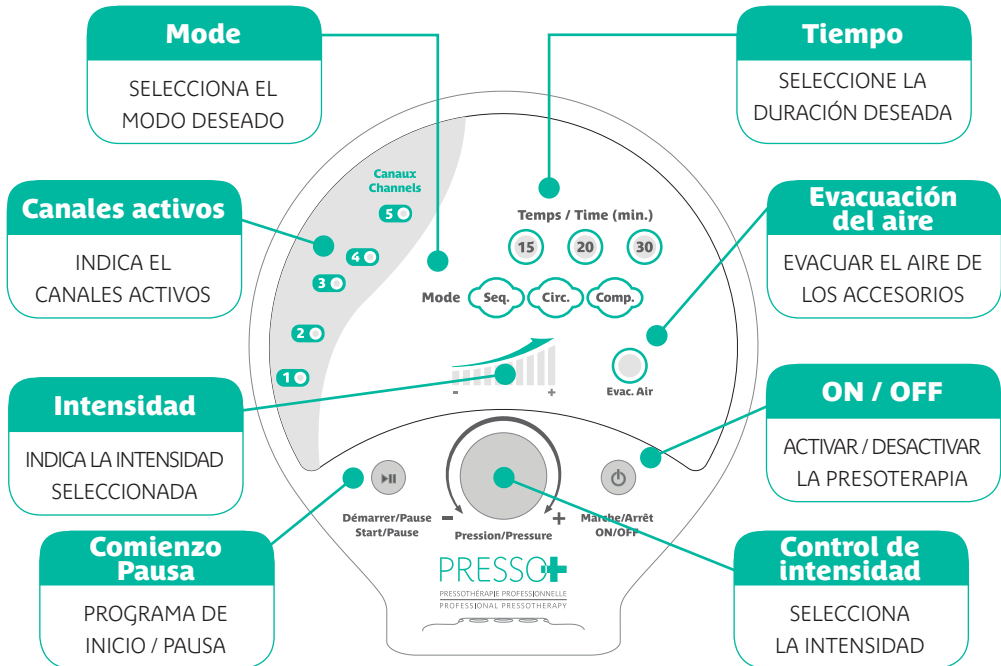


AVERTENCIA !

- Qúitese todas sus joyas (como collares, tobilleras, anillos, relojes) antes para utilizar el dispositivo. También evite llevar ropa con botones.
- Use ropa delgada o aplique una toalla para que la piel no esté en contacto directo con el accesorio de masaje de presión de aire.

3. CONECTOR DE ACCESORIOS


Conecte la manguera al receptor antes de encender la unidad. El sistema de alarma sonará si la manguera no está conectada y el aparato no podría iniciar. Para apagar la alarma, conecte el receptor o apague la unidad.

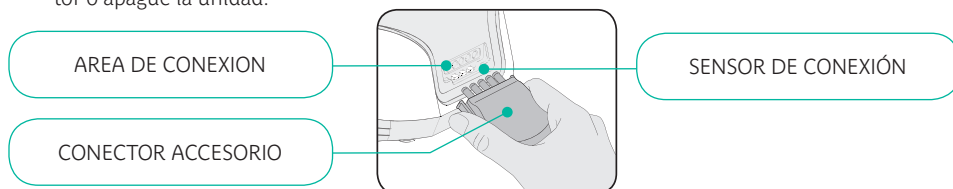

4 PREPARACIÓN Y INSTRUCCIONES

1. COLOCARSE EL ACCESORIO DE MASAJE

- Elegir el accesorio de masaje y ponerla en el cuerpo (pierna, brazo, abdomen/cadera).
- Conectar la clavija del accesorio elegida con en el receptor de la máquina.
- Cada modo de masaje trabaja adecuadamente sólo cuando está enchufado al conector del mismo color.

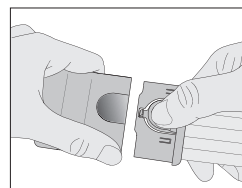

PRENDA PARA PIERNAS (INCLUIDO)

- Las piernas deben estar estiradas durante la sesión y se pueden usar las plantillas al mismo tiempo.
- Introducir la pierna en la bota de masaje, subir la cremallera y cerrar con el velcro.
- Si es necesario, puede utilizar el extensor para hacerlo mas ancho (no está incluido).
- Puede utilizar las plantillas durante el masaje sujetándolas con la goma del interior.


ACCESORIOS PARA BRAZO Y ABDOMEN (NO INCLUIDO)

- Para fijar corectamente el brazo, use la banda.
- El accesorio se soltará si no está fijado convenientemente.
- Coloque el accesorio de masaje para el abdomen o cadera alrededor de la cintura, cogiendo el conector a la izquierda.
- El accesorio de masaje para el abdomen debe cubrir la parte baja de la espalda y también la parte alta de las caderas.



2. CONECTAR LA CLAVIJA A LA MÁQUINA

- Conecte la manguera al receptor antes de encender la unidad.
- El sistema de alarma sonará si la manguera no está conectada y el aparato no podría arrancarse.
- Para apagar la alarma, conecte el receptor o apague la unidad.

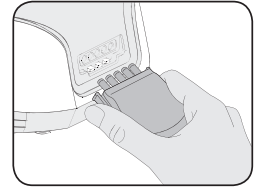

3. CONECTA EL DISPOSITIVO A LA RED ELÉCTRICA.


- Conecte el cable de alimentación a la potencia del país de uso.

4. ENCENDER LA PRESOTERAPIA

- Presione el botón "On/Off" para encender la alimentación.


AVERTENCIA !

- Al presionar el botón "Inicio / Pausa" se activa el modo de masaje preprogramado (Modo: Completo / Tiempo: 15 min).
- Compruebe siempre el nivel de intensidad antes de comenzar.

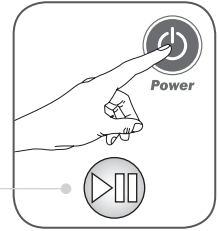

5. PROGRAMAR EL TIEMPO DE MASAJE

- El tiempo preprogramado para el masaje es de 15 minutos, pero puede programar 20 o 30 minutos. No es recomendable exceder los 30 minutos y hacer más de 3 sesiones por día. La máquina se detendrá automáticamente una vez que haya transcurrido el tiempo seleccionado.

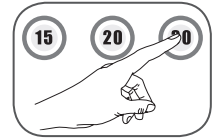


6. SELECCIÓN DEL MODO DE MASAJE

Hay tres modos de masaje para seleccionar dependiendo de sus necesidades. El modo de masaje se indicará con una señal luminosa.

El modo se puede cambiar en cualquier momento presionando el botón "Modo de masaje".




TRES MODOS DE MASAJE

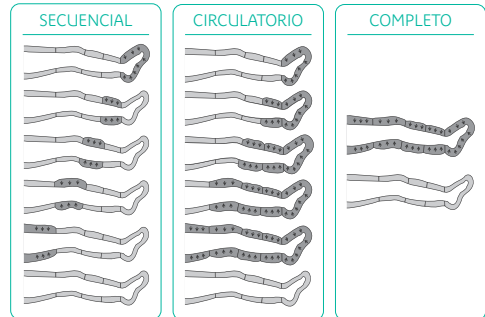

- **SECUENCIAL** : Drenaje linfático, ayuda a eliminar líquidos, combate el exceso de grasa, celulitis y trastornos circulatorios. La compresión segmentaria y externa tiene el efecto de aumentar el drenaje linfático.
- **CIRCULATORIO** : mejora de la circulación sanguínea que causa el adelgazamiento de las venas varicosas, disminuye la sensación de piernas pesadas.
- **COMPLETO** : Masaje de relajación muscular. Sentimiento agradable.

7. SELECCIONA LA INTENSIDAD

- Para aumentar la intensidad, gire el botón giratorio hacia la derecha. Para bajarlo, gírelo en la dirección opuesta. La intensidad seleccionada aparece en la pantalla.
- Puede aumentar la intensidad gradualmente.
- Antes de apagar la unidad, gire el botón de control de intensidad hacia la izquierda.

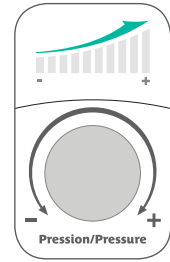


AVERTENCIA !

- Asegúrese de que los accesorios no estén doblados o torcidos durante el proceso y verifique el conector si no siente presión.
- Si siente dolor, el nivel de intensidad es demasiado alto o ha programado demasiado tiempo.

8. INICIAR LA SESIÓN DE MASAJE

- Una vez que haya seleccionado el modo de masaje, la intensidad y el tiempo, debe presionar el botón Inicio / Pausa y comenzará el masaje.
- Si desea detener el masaje, vuelva a presionar el botón Iniciar / Pausa.
- Puede cambiar la hora, el modo de masaje y la intensidad en cualquier punto del proceso.

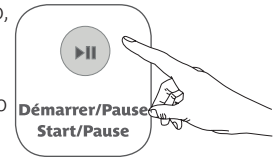

9. DESPUES DE USAR

- Una vez transcurrido el tiempo programado, los accesorios comienzan a desinflarse.
- Para desinflar los accesorios, presione "Evac. Air".
- Apague el dispositivo presionando el botón "On / Off".
- Desconecte todos los conectores de la unidad y los accesorios y retire el enchufe de la red eléctrica.

5 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. ALMACENAMIENTO

- Si no se va a usar durante un tiempo debe desenchufar el cable de alimentación y poner la máquina en un lugar fresco. En este caso, es recomendable cubrir la máquina para que no le entre polvo.
- Guarde la máquina en un lugar seco después de limpiarla con un paño suave. No utilice productos abrasivos.
- Todos los tubos conectores deben desenchufarse de la unidad principal antes de ser guardados.
- No guarde el producto donde le alcance la luz solar directa o haya algún dispositivo de calefacción cerca.

2. MANTENIMIENTO

- Apague y desenchufe la máquina antes de limpiarla.
- Limpie las superficies de plástico con un paño suave, puede usar un detergente neutro. No utilice productos abrasivos. Elimine cualquier resto de detergente con un paño seco.
- No lave las prendas/accesorios de masaje en la lavadora.

3. AVISO

- No lave ni moje ninguna parte eléctrica.
- No utilice productos abrasivos ya que esto puede decolorar o romper la máquina.
- Siga las instrucciones del proveedor si decide elegir otros detergentes o desinfectantes para limpiar la máquina.
- Para reemplazar o reparar un cable de alimentación dañado, comuníquese con los Servicios Técnicos.

6 SOLUCION DE PROBLEMAS

1. LA UNIDAD PRINCIPAL NO SE ENCIENDE

- Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación.
- Asegúrese de que los tubos conectores están firmemente conectados a la unidad principal. La unidad principal no se encenderá si no está enchufada correctamente.
- Enchufe el tubo conector hasta la unidad principal.
- Si este fallo sigue produciéndose, contacte con el vendedor o con el servicio de atención al cliente.

2. LA UNIDAD SE ENCIENDE PERO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

- Reinicie la unidad, apagándola y encendiéndola de nuevo.
- El dispositivo puede no funcionar correctamente a temperaturas demasiado bajas.
- Asegúrese de que ninguno de los tubos conectores está doblado o colocados bajo algún objeto pesado.
- Asegúrese de que no hay fugas de aire.
- Esta unidad está equipada con sensores de presión pero seguirá funcionando aún cuando existan fugas de aire en los siguientes casos, aunque la intensidad puede ser menor de la que debiera:
 1. El tubo conector se ha soltado de la prenda de masaje: vuelva a conectar el tubo conector a la prenda de masaje.
 2. El tubo conector no está correctamente enchufado a la unidad principal: enchúfelo el tubo conector correctamente.
 3. El tubo conector se ha soltado del conector de la prenda de masaje: vuelva a conectar el tubo conector correctamente.
 4. Hay fugas de aire en la prenda de masaje y/o en los tubos conectores: contacte con nuestro servicio de atención al cliente.
- Puede recibir electricidad estática, pero esto no supone un funcionamiento defectuoso de la máquina.
- Puede oír un sonido de fuga de aire durante su uso, pero ese sonido es normal, es para prevenir daños a la unidad y por su propia seguridad, y no supone un funcionamiento defectuoso de la máquina.

3. EL ENCHUFE Y/O CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁN DAÑADOS

- Si el enchufe y/o cable de alimentación están dañados, contacte con nuestro servicio cliente.