


# Magneto Bienestar 2.0

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

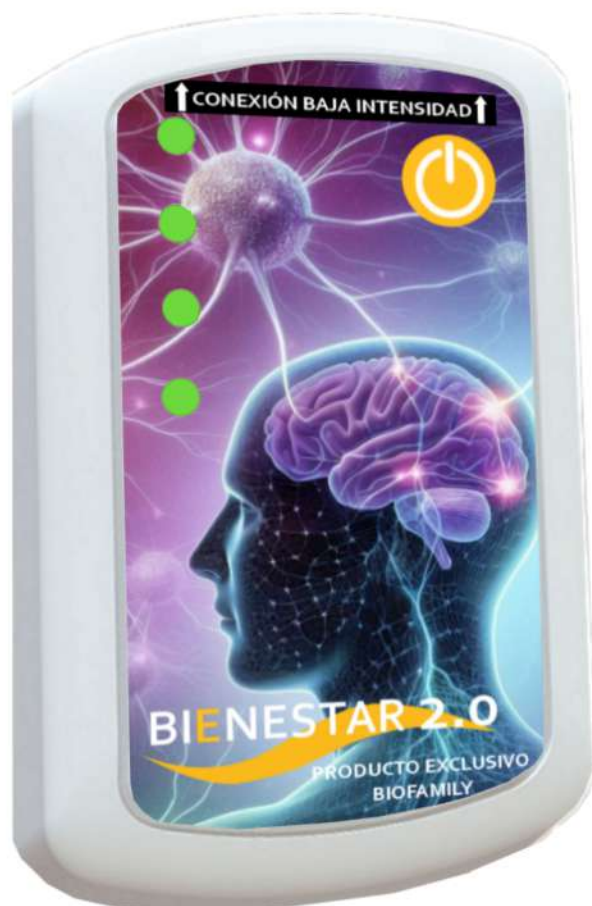

**Distribuidor exclusivo  
para España:**

**BIOFAMILY**

Tlf. Asistencia Técnica  
692 27 60 15 (solo WhatsApp)

## RESUMEN DE FUNCIONES:



- ① Botón de encendido /apagado
- ② Conexión de muy baja intensidad para conectar a la almohada técnica.
- ③ Conexión de alta frecuencia para conectar a la Cervicalera u otros dispositivos tales como el Topper.
- ④ Cuatro LEDs bicolors (verde - azul)
- ⑤ Clavija para conectar el cargador de la batería.

## USO:

Presione el botón 1, los LEDs se iluminarán en verde durante aproximadamente 5 segundos para indicar el estado de la batería. La cantidad de LEDs encendidos indica el estado de la batería:

- 4 LEDs encendidos 100% de la carga aprox.
- 3 LEDs encendidos 75%
- 2 LEDs encendidos 50%
- 1 LED encendidos 25%

Inmediatamente después el tratamiento comienza con una duración preestablecida de 6 horas. (Programa Nocturno) tanto para la salida 2 **“Conexión a la almohada de bajísima intensidad”** como para la salida 3 **“Conexión a la cervicalera”** u otros complementos magnéticos, de alta frecuencia.

Durante la terapia, los LEDs, (en azul) se desplazan alternativamente hacia adelante y hacia atrás para indicar que se está realizando el ciclo.

Al final del tiempo establecido (6 horas), la Magneto Bienestar se apaga automáticamente.

Si por otro lado tiene la intención de interrumpir el tratamiento en cualquier momento, simplemente mantenga presionado el botón 1 durante 3 segundos (encendido/apagado) el tratamiento se detendrá y los LEDs se apagarán.

### **BATERÍA Y RECARGA:**

Antes del primer uso compruebe el estado de la batería, en el caso de no estar cargada del todo, ponerla a cargar.

Inserte (con el aparato apagado) el cargador en la red eléctrica y luego conéctelo a la máquina en la salida 5. Al cargar, los LEDs parpadearán en verde y, cuando la carga está concluida, después de un breve parpadeo, se apagará. (el tiempo de carga es de 6/8 horas aprox. cuando está totalmente descargada).

**Magneto Bienestar no funcionará mientras se esté cargando la batería.**



**biofamily.es**



**biofamily descanso**



**656 85 11 92 (de 10:00 a 13:00 h) Atención al cliente**



**613 12 66 34 Admintración (solo WhatsApp)**



**692 27 60 15 Asistencia Técnica (solo WhatsApp)**



**C/ Manrique 21, 29013 (Málaga)**



**www.biofamily.es**